

YENİ

Monobond® Etch & Prime

Self-etch cam-seramik primer



Tek adımda
Asit ve
Primer



Monobond® Etch & Prime


Restorasyon yüzeyinin doğru hazırlanması adeziv simantasyon uygulamasının can alıcı bölümlerinden biridir. Standart uygulamada, cam-seramik restorasyon yüzeyine önce hidroflorik asit ve ardından silan uygulanır. Ancak toksikpotansiyelinden dolayı hidroflorik asit uygulaması pek sevilmez.

Monobond® Etch & Prime, cam seramik yüzeylerin tek bir adımda hem asitleyip hem de primerlemenizi sağlayan dünyadaki ilk tek bileşenli seramik primeridir. Solüsyon aynı zamanda yüzeyde kalmış tükürüğü de temizler

Hepsi tek şişede

Yeni seramik hazırlayıcı ile silanın tek likitteki mükemmel karışımı sayesinde cam-seramik yüzeyler için tek ürün yeterli. Ayrıca bulundurulması gereken materyal de en az sayıda.

Geleneksel cam-seramik hazırlama sistemleri en az 2 farklı bileşen içerirken:

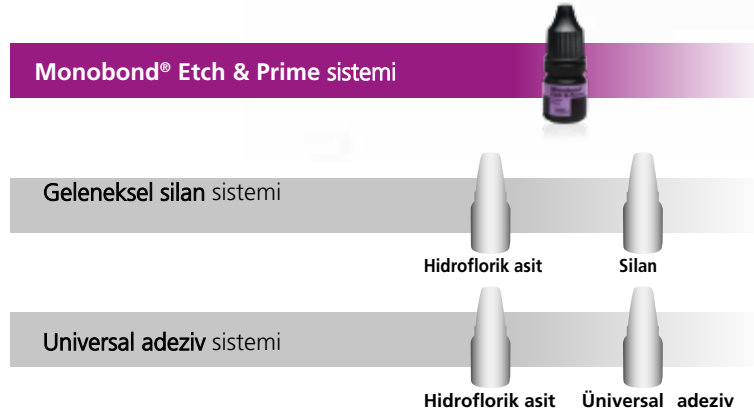

KISA UYGULAMA

Asit ve silan uygulamalarının birleştirilmesi cam-seramik restorasyonların hazırlanması işlemlerini belirgin şekilde kısaltır. Bu işlemi kolaylaştırırken aynı zamanda hata riskini de azaltır.

Monobond® Etch & Prime uygulaması:



Conventional process




Dayanıklı güvenilir bağlantı

Gelişmiş formülüyle Monobond Etch & Prime cam-seramik yüzeyde primer reaksiyonunun yüksek seviyede olmasını sağlar


Yeni seramik hazırlayıcı(conditioner) seramik yüzey ile silan arasındaki reaksiyondan sorumludur. Birlikte güçlü bir kimyasal bağ oluştururlar.

Etkili kombinasyon cam-seramik yüzeyin hazırlanması işlemini kolaylaştırdığı gibi hidroflorik asit için de alternatif yaratır. Bu sebeple, laboratuarda önışleme tabi tutulmuş restorasyonlara da Monobond Etch & Prime uygulanabilir.

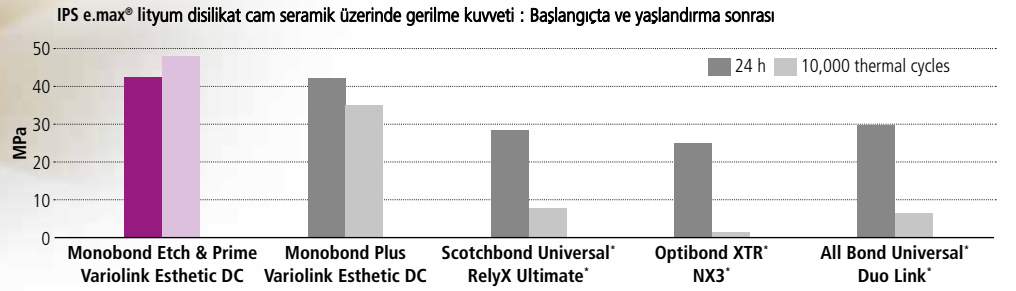

*Not registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG.
Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Monobond Etch & Prime, bütün metakrilat bazlı simantasyon kompozitleri ve cam-seramiklerle kullanılabilir.

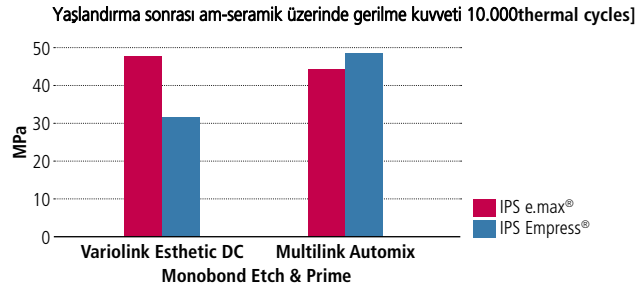

Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015



Sipariş Bilgisi

Refill 673026WW
1 bottle Monobond Etch & Prime, 5 g



Simanlar labirentinde yolunuzu bulmak

Ivoclar Vivadent'in polüler multimedya uygulaması The Cementation Navigation System(Simantasyon Navigasyon Sistemi), dişhekimlerine her vaka için pratik oryantasyon ve rehberlik sağlar.

www.cementation-navigation.com



Fixed Prosthetics

Monobond® Etch & Prime "Sabit Protezler" ürün kategorisinin bir parçasıdır. Bu kategorideki ürünler -geçici restorasyondan restorasyon bakımına kadar- sabit protetik restorasyonların hazırlanması uygulamalarını kapsar. Ürünlerin birbirleriyle uyumu başarılı uygulama sağlar.



"Sabit Protezler" kategorisindeki ürünlerle ilgili bilgi almak ister misiniz? Yetkili satıcınıza başvurun veya www.ivoclarvivadent.com.tr adresini ziyaret edin.