

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Nano-optimize 4-mm. kompozit



Size zaman kazandıran
yeni kompoziti
keşfedin


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Zaman kazandıran yeni kompozit

Günlük dental uygulamalarda sınırlı süreyi ayarlamak gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Dolgular çabuk yapılmalı ama estetik olmalıdır. Bu durum başarılması zor gibi görünebilir. Fakat aslında böyle değildir.

Yeni Tetric N-Ceram® Bulk Fill ile ödün vermenize gerek yok. 4 mm.ye kadar katmanlarla dolgu maddesi kolayca kaviteye yerleştirilir ve 10 saniyede ($> 1,000 \text{ mW/cm}^2$) sertleştirilir: posterior bölgede geniş kapsamlı iyi sonuçlar.



Başlangıç durumu



4-mm. lik katman uygulaması



Polisaj sonrası final görünüm
Fotolar: Dr Michael Dieter



Dolgularda yeni yöntem

Şimdiye kadar, kavite doluncaya dek 2 mm. lik tabakalar uygulanıyordu. Bu da diş hekimi için zaman kaybına yol açardı. 4 mm. ye kadar olan katmanlar Tetric N-Ceram® Bulk Fill ile artık mümkün.

Yumuşak, hoş kıvamı sayesinde, dolgu maddesi kolayca ve etkili bir şekilde kaviteye yerleştirilebilir ve şekillendirilebilir.



Konvansiyonel
2-mm.lik tabaka



Tetric N-Ceram Bulk Fill ile
4-mm.lik katman

Sofistike bir kavram


Tetric N-Ceram Bulk Fill diğer geleneksel kompozitlerle karşılaştırıldığında her açıdan daha iyi estetik sonuçlar üretir. Patentli foto-başlatıcı Ivocerin sayesinde 4 mm. polimerizasyon derinliği sağlanır.

Ivocerin polimerizasyon hızlandırıcı diğer geleneksel başlatıcılara göre daha reaktiftir. Derin kavitelerde bile kısa polimerizasyon aralıklarında güvenilir sertleşme sağlanır.

Yenilikçi posterior kompozit, estetik sonuçlar için üç üniversal renkte ve %15 mine benzeri translüsens özellik ile sunulmaktadır:

- IVA - Hafif kırmızımsı dişler için
- IVB - Hafif sarımsı dişler için
- IVW - Süt dişleri ve açık renkli dişlerin dolguları için beyaz


Yeni ışıık- başlatıcı Ivocerin

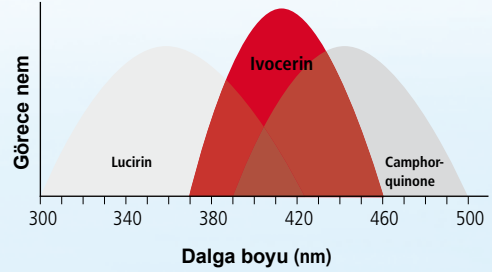


+ Standart başlatıcı sistem
Ivocerin
4 mm.lik katmanlarla
komple polimerizasyon

Esnek kompozit

10 saniyelik (> 1,000 mW/cm²) kısa aralıklı polimerizasyon süresine rağmen, Tetric N-Ceram Bulk Fill 200 saniyelik işlem süresine olanak sağlar. Patentli ışık kontrolü ile ortam ışığına karşı koruma sağlar ve zaman baskısı olmadan estetik modelaja imkan verir. Büzülme stresinin en düşük seviyede tutulduğundan emin olmak için Tetric N-Ceram Bulk Fill, büzülme stresini azaltan özel maddeler içerir ve büzülme sırasında oluşan kuvvetleri azaltan bir yay gibi çalışır.

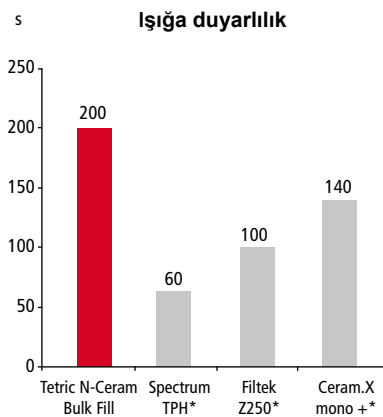

ISO 4049 a göre ölçümleme, R&D Ivoclar Vivadent AG, Temmuz 2012
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir..

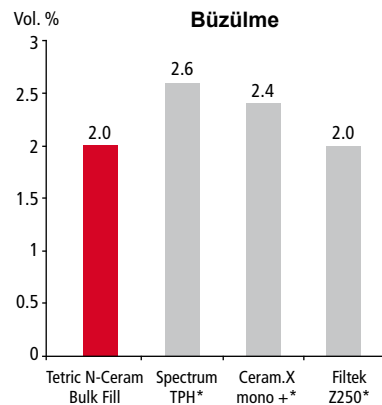

Watts'a göre ölçümleme, R&D, Ivoclar Vivadent AG, Temmuz 2012
*Bu markalar Ivoclar Vivadent AG. tescilli markası değildir.

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Nano-optimize 4-mm. kompozit

Mükemmel verimlilik

Posterior kompozit Tetric N-Ceram Bulk Fill, Tetric N-Koleksiyonunun tüm ürünleri ile kombin edilebilir ve posterior bölgede etkileyici sonuçlar sağlar.



PAKETLEME

Art. No. Refill 1 x 3.5 g

644171 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVA

644172 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVB

644173 Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVW

Art. No. Refill 10 x 0.25 g

644174 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVA

644175 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVB

644176 Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVW

644153 Renk skalası



Bu ürün "Kompozit" yetkin alanımızın bir parçasıdır. Bu kategoriye giren tüm ürünler birbirleri ile optimal uyum içindedir.

Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation